


はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用頂くため、ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。
お読みになった後はいつでも見られるよう大切にお手元に保管してください。

注意事項


- 本製品を正しくご使用いただくために以下のことを守ってください。
- 本製品は防水機能が付いておりませんので水濡れにはご注意ください。
 - 性能を維持するため、本体を常にきれいにしてお使いください。
 - 本製品の保管場所環境が大きく変化した際に測定の精度が落ちる恐れがあるために
すこし時間を置いてからご使用ください。
 - 測定対象の皮膚や物質の表面が濡れている場合は測定精度が落ちる恐れがあります。
 - 物質の温度を測る際の表示温度は表面温度となります。
 - 分解や改造または規定電源以外のバッテリーを使用すると
正確な測定不良や故障の原因となりますので絶対にしないでください。
 - 高温多湿や長時間直射日光の当たる場所に置かないでください。
劣化や機能異常を起こす恐れがあります。
 - 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
 - 長い時間使用しない場合は電池を外してから保管してください。
 - 強い衝撃や変形、落下をさせないでください。
 - 本製品の仕様により生じた損害や逸失利益または第三者からお客様に対してなされた
損害賠償請求にもとづく損害について一切責任を負いません。

各部説明

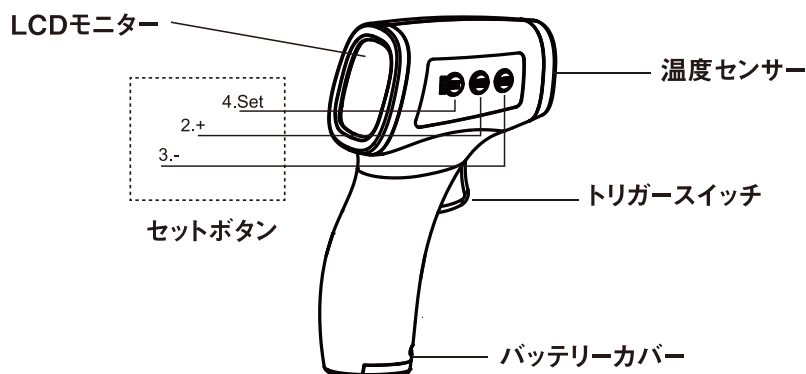

使い方

温度計底部分の電池カバーを開け単4電池2本(※別売)を入れ、カバーを閉めます。トリガースイッチを押し、音が2回鳴ったことをご確認いただいたらご使用いただけます。

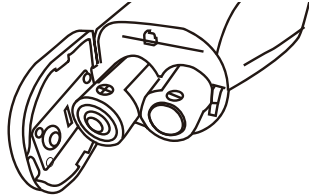

項目	表記	説明
測定モード	Body	体温測定モード
	Surface Temp	室温・物質測定モード
バッテリー		電池が少ない際に表示
サウンド		音声でお知らせの際に表示
表示温度	°C	摂氏表示
	°F	華氏表示
アラーム	LO	測定可能温度より低い
	HI	測定可能温度より高い

モード設定

「SET」ボタンを押すと、体温モードと室温モードの切り替えができます。
°C/°Fの切り替:「SET」ボタンを6秒押すと、摂氏(°C)と華氏(°F)の切り替ができます。

測定

モニターに「Body」と表記されたことを確認し、温度検知面を測定対象から3~5cm離していただき、トリガースイッチを押します。
音が1回鳴るとモニターに温度が表示されます。

室温・物質 温度測定

モニターに「Surface Temp」と表記されたことを確認し、温度検知面を測定対象物から3~5cm離していただき、トリガースイッチを押します。
音が1回鳴るとモニターに温度が表示されます。

アラーム

体温測定モードで測定対象者の体温が37.5°C以上の場合は、アラームでお知らせします。

測定履歴

「+」「-」ボタンを押すと自動で保存された測定履歴を検索いただけます。(最大32個まで)

異常アラームについて

- 【体温測定モード】 測定対象者の体温が32°C以下の場合は、アラームが4回鳴り、画面に「LO」と表示されます。
測定対象者の体温が43°C以上の場合は、アラームが4回鳴り、画面に「HI」と表示されます。
- 【室温・物質測定モード】 測定対象物の温度が5°C以下の場合は、アラームが4回鳴り、画面に「LO」と表示されます。
測定対象物の温度が95°C以上の場合は、アラームが4回鳴り、画面に「HI」と表示されます。

仕様

測定温度範囲	体温:32°C~42.5°C 物質:5°C~95°C 室温:15°C~40°C	測定データ記録数	直近32個
		電源	DC3V(単4電池×2本)※別売り
測定距離	3cm~5cm	サイズ	14.9cm×9.5cm×4.4cm
測定時間	1秒	本体重量	129g
精度(誤差)	±0.2°C	付属品	取扱説明書(英語/日本語)